



アプリ各画面の説明

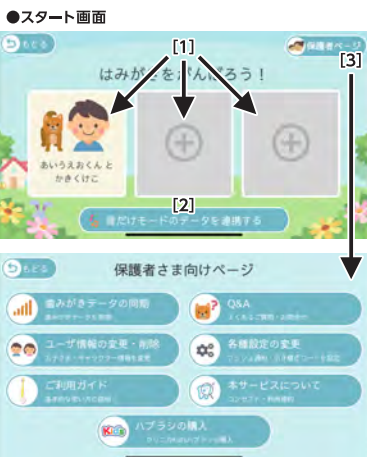

- スタート画面
- [1] はみがきをするお子さまの登録先を選択してください。
- [2] 音だけモードのデータを同期するときにタップしてください。
- [3] 保護者ページが表示されます。各種設定の変更、Q&Aの閲覧、データ同期、ご利用ガイドの閲覧、本サービス情報の閲覧、ハブラシ購入ができます。
※ユーザー情報から本体のIDが確認できます。

ホーム画面

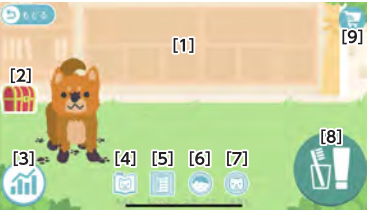

- [1] 歯みがき後にもらえるプレゼントが表示されます。
- [2] [1]に並びきれなくなったプレゼントを確認することができます。
- [3] 歯みがきの結果を見返すことができます。グラフをタップすると歯みがきのより詳細な結果を閲覧することができます。
- [4] 「始まるの物語」を読めます。
- [5] 「目標設定」ができます。
- [6] 歯みがきのステータスを確認することができます。
- [7] キャラクターを変更することができます。
- [8] 自分みがきプレイ(下記)を始めることができます。
※歯みがきが終わると、本ボタンはグレーになります。
歯みがき後、3時間経過すると再び緑色に変わります。
- [9] ハブラシを購入することができます。

●お子さまの自分みがきプレイ画面



- [1] 現在みがくべき場所がハブラシのイラストで表示されます。
ハブラシが右にある場合は、右の歯をみがいてください。
- [2] 音符や泡は、ハブラシの動きに合わせて増減します。
- [3] 自分みがきプレイの経過を表示しています。
- [4] 自分みがきプレイを途中でとめることができます。

●保護者の仕上げみがきプレイ画面



- [1] 仕上げみがきプレイの経過を表示しています。
- [2] キャラクターをタップすると、キャラクターがしゃべります。
- [3] 仕上げみがきプレイを途中でとめることができます。

お手入れと保管

- 本体は丸洗いでできません。
本体が汚れた場合は、水をしみこませて固く絞った布などで軽くふきあげてください。
破損、故障の原因となるので、シンナー・ベンジン・アルコール・熱湯・除光液・漂白剤などを使用しないでください。
- 本体内部に水が入らないようにしてください。
本体表面に水がかかった場合は、乾いた布などで本体の水気をふきとってください。
- 長期間使用しない場合はケースなどに収納して高温多湿の場所を避け、乳幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。
再度ご使用いただく場合は水をしみこませて固く絞った布で軽くふいてから、ご使用ください。
- ハブラシのブラッシング効果を維持するため、1か月を目安に(毛先がひらいたら)、ハブラシを交換してください。

故障かな?と思ったら

正常に作動しないときは、お問合せや修理を依頼される前に、下記の一覧表で確認してください。

こんなとき	考えられる原因・対処の方法
本体のスイッチボタンを押しても光らない、音がしない	本体の充電が切れているかもしれません。 本体を充電してください。
本体の充電完了後もスイッチボタンが光らない	充電が不十分または充電電池の寿命が考えられます。 再度充電を試みてください。
歯みがき完了後も本体のスイッチボタンの光が消えない	本体とアプリが連携されたままになっているかもしれません。スイッチボタンを1秒以上長押ししてください。
音だけモードで歯みがきをするとき、本体から音が聞こえない	本体の音量調節を試みてください。専用アプリの保護者ページの「ユーザー情報の変更」から変更できます。
本体にハブラシが差し込めない、または抜けやすい	ハブラシが適合ハブラシではない可能性があります。 クリニカKid'sハブラシ(3-5才用)をご使用ください。
本体と専用アプリが連携されない	Bluetooth®機能が無効になっているかもしれません。有効に変更ください。 本体とスマートフォンが離れているかもしれません。スマートフォンの近くで再接続してください。 電子レンジなど家電製品から離れて再接続してください。
専用アプリが起動しない、動かない	スマートフォンを再起動し、アプリを起動してください。

※ファームウェア(本体を制御するためのソフトウェア)のアップデートをお願いする場合があります。
その場合は、アプリに配信される「お知らせ」に従って、アップデートをしてください。

仕様

●本体	
電源電圧	・DC 3.6V：充電式リチウムイオン電池 ・DC 5V：充電時
消費電力	約0.04W(音だけモード使用時)
充電方式	電磁誘導方式
充電時間	約3時間(室温23℃にて) ・充電電池特性として、繰り返し充電することで1回の使用時間は短くなっていきます。 ・満充電しても、著しく使用時間が短くなったら、充電電池の寿命です。 ・充電電池は交換できません。 寿命がきたら、本体の買替えをお願いします。
通信方式	Bluetooth® low energy technology
通信距離	約10m
本体メモリ容量	歯みがきデータ 7回分(18分相当)
質量	約20g
寸法	高さ59mm×幅27mm×厚み37mm
材質	SBC、ABS樹脂
●microUSBケーブル	
質量	約20g
寸法	約1m
材質	本体：PVC、導線：銅

●付属ハブラシ

販売名	クリニカKid'sハブラシ(3-5才用)
柄の材質	本体：ポリプロピレン ラバー部：SBC、ポリプロピレン
毛の材質	ナイロン
毛の硬さ	ふつう
耐熱温度	80℃

※断りなく仕様を変更することがあります。

廃棄するとき

ハブラシ、本体、microUSBケーブルは、お住まいの市区町村の指導に従い廃棄してください。

商標について

- ・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、ライオン株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。
- ・Appleは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.サービスマークです。
- ・Android、Google Play™およびGoogle Play™ロゴは、Google LLCの商標です。

Bluetooth®通信のご使用について

以下の状況において通信感度に影響を受けることがあります。

- ・本体とスマートフォンの間に壁や金属、人体、反射面などの障害物がある場所
- ・無線LANが設置されている場所
- ・複数のBluetooth®機器を近距離で使用している場所
- ・電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所

これらの状況では、電波の影響で正常に動作しない場合があります。

・正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。

※Bluetooth®通信中に、データや情報の漏洩、事故や社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

免責事項について

- 第三者による行為、その他事故およびお客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- お客様ご自身で本製品の使用により登録された情報が万一消去してしまうことがあっても、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用により、スマートフォン等その他機器やソフトウェアに生じた損害に対し、当社は一切責任を負いません。

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、ライオン株式会社お客様センターまでお問合せください。
以下の保証条件にて無償対応させていただきます。
- 保証期間中の保証規定に基づいた交換をお受けになるときは必ず、商品と品質保証書を添えて、ライオン株式会社へ送付ください。
その際、品質保証書にご購入を示す明細書(レシート)が添付されていることが必要です。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ・誤った使用法、および不当な修理、分解による故障および損傷。
 - ・お買い上げ後の落下、輸送等の過度な衝撃による故障および損傷。
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - ・一般家庭用以外(たとえば業務用での長時間使用)に使用された場合の故障および損傷。
 - ・本品の品質保証書の提示が無い場合。
 - ・本品の品質保証書にお買い上げ日・販売店の記入およびレシートの添付が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- この保証書は日本国内のみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめの上、レシートと一緒に大切に保管してください。
- 本品の修理用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有年数は製造を終了した後5年間で、交換のとき、部品、その他の付属品は代替品を使用させていただきますこととありますのでご了承ください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年です。
- ハブラシは保証の対象外です。(消耗品として新たにご購入いただくことになります。)

クリニカKid's はみがきのおけいこ

取扱説明書 品質保証書付

対象年齢3才以上
(自分でブラッシングできる方)



このたびは、クリニカKid's「はみがきのおけいこ」をお買いあげいただき、ありがとうございます。

- ・正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。
- ・本書は、いつもお手元においてご使用ください。
- ・本書は、品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- ・本書に記載しているイラストはイメージ図です。

<品質保証書>

品質保証書は必ず大切に保管しておいてください。

品名	クリニカKid'sはみがきのおけいこ
型番	LC-K20
保証内容	対象部分 本体/microUSBケーブル (但しハブラシは除く)
期間(お買上の日より)	1年

お買上日	年 月 日
お客様ご住所	〒 TEL
お客様お名前	様

販売店 住所・店名

—レシート添付—

ご記入いただいた個人情報は保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。

商品のお問合せ・送付先
ライオン株式会社 0920
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7
(お問合せ先 0120-556-913(お客様センター))



R 007-AH0171